



A „globális terápiás csomag”: Twicare®

Indikáció

- **Fő kezelési javallat** Class II és Class III funkcionális ortopédiai esetekhez
- A Twicare® szerepe az orthodonciában:
 - ▶ „Essentially in interception”: stimuláció, útmutatás, akadályok elhárítása, harapásemelés
 - ▶ Alveoláris tünetekhez: retro-alveoláris vagy alveoláris nyúlvány, keresztbarapásos metszőfog
 - ▶ Vertikális dimenziók harmonizálása: anterior nyitott harapás összehúzása, mélyharapás csökkentése
 - ▶ Mandibuláris kinematikai rendellenességekhez
- A Twicare® **tökéletesen működik együtt rögzített fogszabályzó készülékkel:**
 - ▶ Kiegészíti és katalizálja bracketek hatásait, és ráerősít azok hatékonyságára
 - ▶ Egyetlen fázisban kezel, fenntartva a morfológiai és funkcionális egyensúlyt a kezelés végéig, stabilitást biztosít
- A Twicare®-nek **könnyű mechanikai fogszabályzó hatása van:**
 - ▶ „Eumorphic action”: Egyszerre ortopédiai és orthodonciai hatás, ez idézi elő a teljes körű szabályzást, helyreállítást.
- **A dupla ívről:**
 - ▶ Ideiglenes retainer, mely stabilizálja az ortopédiai eredményt, meggátolja a visszaesést, a fogak elmozdulását
 - ▶ Retenció hatás Class II és Class III eseteknél, különösen a pubertás korú pácienseknél
 - ▶ A dentoalveoláris eredmény megtartása, vegyes fogazat maradó fogazattá válásakor, és biztosítja fogszabályzás végeredményének fenntartását.
 - ▶ Ideiglenes vagy végleges eredmény retenciója
 - ▶ Keresztirányú fogszabályzás
 - ▶ Elősegíti a maradó fogak szabályos kitörését
 - ▶ „Multiple interception aspects”
 - ▶ stb.

Ellenjavaslat

- Olyan páciensek esetében, akiknek kórtörténetében temporomandibuláris rendellenességek szerepelnek
- Abban az esetben, ha a páciens allergiás a készülék bármely anyag összetevőjére
- Súlyos, sorozatos alvás közbeni fogcsikorgatással küzdő betegeknél

A Twicare®-rel érezni a különbséget Bimaxilláris propulzió és retropulzió

- **Éjszakai viselet**
- **Előformázott** azonnal alkalmazható
- **Rugalmas** és kényelmes
- **Állítható** pozíciók lehetővé teszik a propulzív vagy retropulzív hatást, könnyen és azonnal aktiválható a fogorvosi székben
- **Visszakövethető**
- **Sterilizálható**
- Alkalmazható:
 - ▶ alkalmi szájlégzésnél
 - ▶ instabil vegyes fogazathoz
 - ▶ rögzített fogszabályzó készülékkel
- **Előnyei:**
 - ▶ **páciensek számára:** kényelem, éjszakai viselet, kézzel fogható és ösztönző eredmények rövid időn belül
 - ▶ **kezelőorvos számára:** idő, pénz és energia megtakarítás
 - ▶ **asszisztens számára:** kevesebb raktár készlet és leegyszerűsített intéznievelők

Herna Dent

1045 Budapest, Naputca 5 • T/F +36 1 370 20 98 • M +36 20 517 5509 • E info@hernadent.hu

www.hernadent.hu

The Twicare® is a Class I medical device, for single patient use, designed and manufactured in France by FCI SYSTEM through its Medical Devices Business Unit MEDVENTIV. This device is a regulated health product. CE marking was obtained in 2011 and USFDA registration in 2012.



twicare®

active multifunctional orthosis

BRETAGNE®



CE FDA cleared

Eredeti és egyedülálló: Innováció Önnek tervezve!

Kivehető, rugalmas, állítható készülék ortopédiai és orthodontiai kezelésekhez, ideális Class II és Class III esetekhez

Csúcstechnika, a Twicare® széles körben alkalmazható minden korosztály és minden fogazat számára:

CAD-CAM rendszerrel kialakított forma, most kétszer olyan zseniális!

A Twicare® úgy találták ki, hogy segítse az orvosi kezelés hatékonyságát.

Az innovatív és szabadalmaztatott technológia követi a fogazat anatómiáját azáltal, magas kényelmet biztosít a páciens számára és garantálja a teljes biztonságot minden alkatrészére.



1 modell 10 különböző méretben és színben




Twicare® méret kiválasztása


| Sorozat | Méret | Távolság a felső bal és jobb laterális metsző distális oldala között | Inter-molár távolság a két felső egyes molár disto-vestibuláris oldala között |
|---------|-------|--|---|
| S | S1 | 26 mm | 45 mm |
| | S2 | 27 | 47 |
| | S3 | 28 | 50 |
| | S4 | 29 | 52 |
| M | M1 | 31 | 54 |
| | M2 | 32 | 57 |
| | M3 | 33 | 58 |
| L | L1 | 34 | 60 |
| | L2 | 36 | 63 |
| | L3 | 37 | 65 |

Front fogakhoz igazodunk:
Mérés a kapott egyszer használatos vonalzóval


Nem a front fogakhoz igazodunk:
Mérés egy vonalzóval vagy tolmérővel

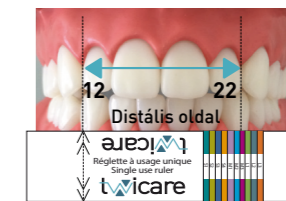


Antero-posterior kapcsolat beállítása

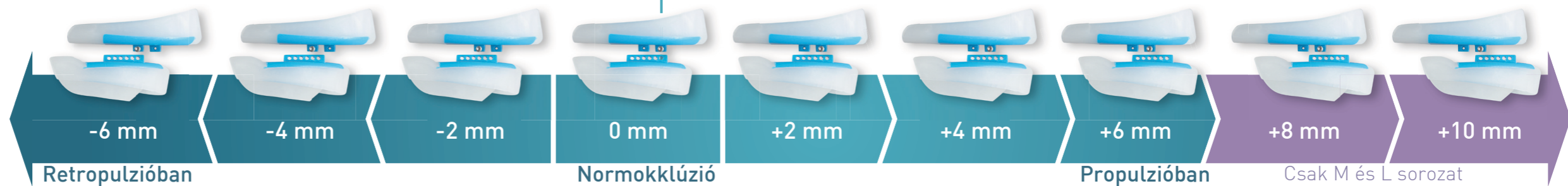

Előnyök:

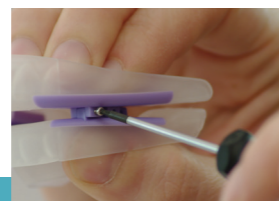

1• Anteroposterior vagy posteroanterior beállítások.

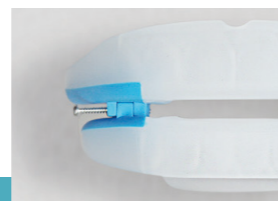


2• Extra magas sík, mely igazodik a mandibula nyugalmi helyzetéhez.



3• A premolárisok és molárisok helyét jelző vágatok hiánya lehetővé teszi a maximális alkalmazkodást minimális kényszerítés nélkül.



4• Széles elülső nyílása megakadályozza a légzőszomj érzését. Igazodika páciens orális légzéséhez.

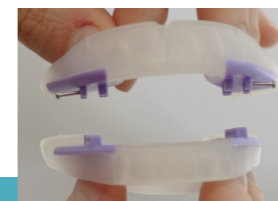

5• A készülék rendkívül könnyű, rugalmas és karcsú.



ÚJDONSÁG!

Twicare® és rögzített fogszabályzó: Mindenki nyer!